

→ Шунты из GORE-TEX® следует прокалывать под углом 45° (рис. 2-5). Такой угол обеспечивает оптимальные условия заживления и уменьшает вероятность повреждения стенки протеза. Созданный иглой прокол формирует естественную "загородку", облегчающую гемостаз.

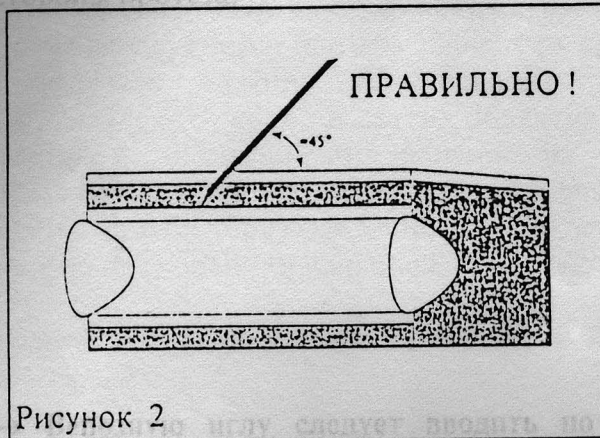


Рисунок 2

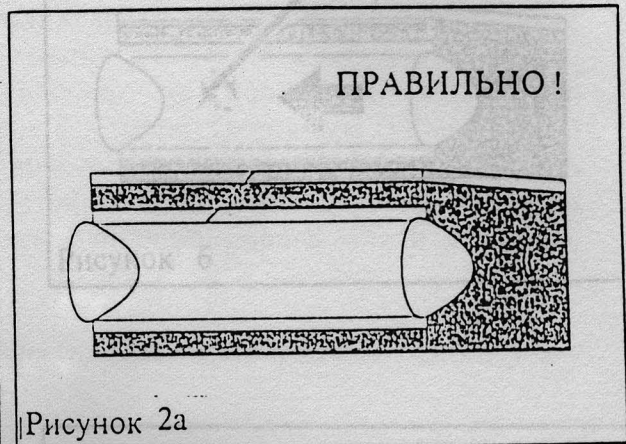


Рисунок 2а

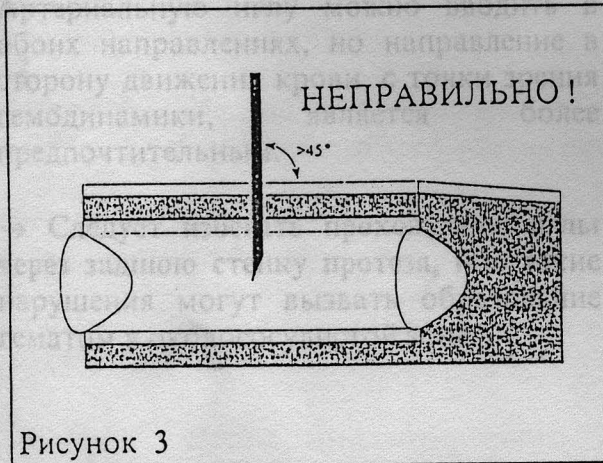


Рисунок 3

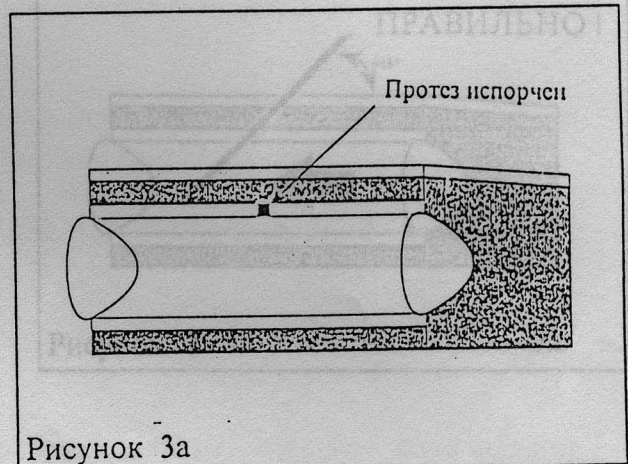


Рисунок 3а

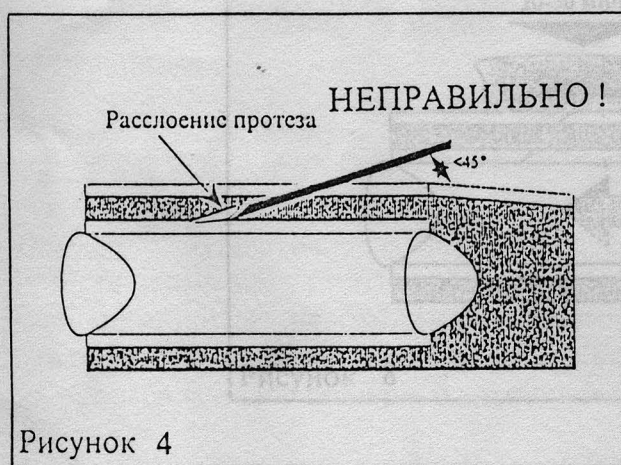


Рисунок 4

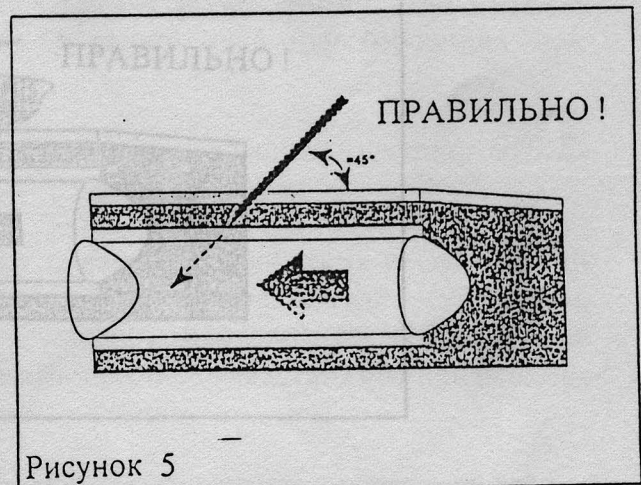


Рисунок 5

→ Давление на место пункции после извлечения иглы должно продолжаться около 20 - 30 минут с таким усилием, чтобы не нарушить кровообращение (рис. 3). Нарушение этого условия может вызвать гематому.